

## CONTACT

# 联系我们

## 佛山市嘉辰医疗科技有限公司

联系电话 13590525978

官网 [www.foshanjiachen.com](http://www.foshanjiachen.com)

地址 广东省佛山市顺德区伦教街道蒿蒲村新熹三路南1号1座4楼

### 核心能力

- 整板或任意列分液，指定列体积可设置
- 支持连续分液、填充、回抽与一键管路清洗
- 适配 6/12/24/48/96/384 孔板及试管架
- 最多存储 30 个用户程序，流程调用更高效

### 应用场景

适用于疾控、血筛、畜牧、实验室样本量较大的快速分液场景，提升标准化和批量处理效率。

FOLD


AUTOMATED LIQUID DISPENSING SYSTEM



# 嘉辰医疗

## 8通道 自动分液器

快速、精准、一致的微量分液平台

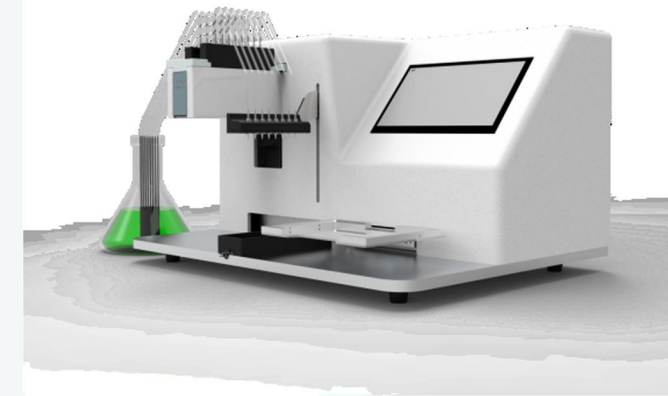

3.5 秒

96孔 10  $\mu$ L分液仅需



解决方案

鸡新城疫-血凝抑制实验高效

8通道  
通道配置

2-9999  $\mu$ L  
分液范围


CV < 3%  
分液精度

7英寸  
触摸屏

佛山市嘉辰医疗科技有限公司

FOSHAN JIACHEN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

FOLD

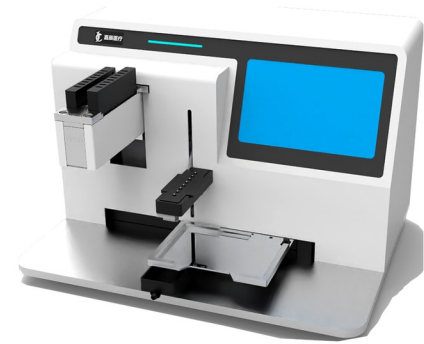

## 自动分液器让实验员解放双手

采用微量蠕动泵分液结构，兼顾精度、一致性和速度。支持多规格孔板与试管架，可完成整板、任意列和指定列分液。

### 速度参考

**3.5** 秒 / 96孔10 $\mu$ L

### 准确度

**±2.5** % / 10 $\mu$ L

### 任意列分液

指定列体积可设置

### 一键清洗

管路清洁更高效



## 快速、精准分液

分液体积 2-9999  $\mu$ L, 1  $\mu$ L 增量设置; 高/中/低三档速度可调, 适配批量实验流程。



## 管路特殊设计, 防污染

8 联排硅胶软管可直接更换拆卸清洗, 内置智能清洗程序, 一键启动、一键清洗。

## 自动化流程

LOAD · SET · DISPENSE · CLEAN

01

装载耗材

02

选择板型

03

设定体积

04

启动分液

05

清洗回抽

## 技术参数

TECHNICAL DATA

名称	分液器	分液管路	8通道
型号	XXXX	辅助功能	振荡、填充、回抽、一键管路清洗
外形尺寸	429×330×257 (长×宽×高)	操作界面	7英寸高清液晶触摸屏, 简洁易懂的中文操作页面
输入电源	AC100-240V~50/60Hz	分液精度	CV<3%
适用板型	6、12、24、48、96、384孔板以及各种试管(需配相应试管架)	分液准确度	10 $\mu$ L±2.5%
分液范围	2-9999 $\mu$ L(1 $\mu$ L增量)	废液处理	活动废液槽
适用板高度范围	5~80mm	适用泵管	1*1、2*1、3*1
连续分液	支持连续分液	程序存储	最多可存储用户程序30个
分液方式	整板或任意列, 可设置指定列分液体积	分液选择	灵活的分液列选择
分液速度	"高-中-低" 三档可调	分液盒更换	预先校准, 更换方便

## 参数亮点

PERFORMANCE SNAPSHOT

**2-9999  $\mu$ L**

分液范围

**6-384**

孔板适配

**5-80 mm**

板高范围

**30组**

程序存储

整板 / 任意列 / 指定列体积 · 连续分液 · 一键管路清洗